

Sorbact kirurgiskt förband med dubbel effekt

Användarinformation

Applicera förbandet över såret, ta försiktigt bort guidefilmen genom att dra i den blåfärgade markeringen.



Sortimentsöversikt

Storlek förband	Storlek sårdyna	Antal/förp.
5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	100
8 x 10 cm	6,5 x 4 cm	20
8 x 15 cm	4 x 11 cm	20
10 x 20 cm	5 x 15 cm	20
10 x 25 cm	5 x 20 cm	20
10 x 30 cm	5 x 25 cm	20
10 x 35 cm	5 x 30 cm	20

Sorbact-metoden innehåller även ett komplett produktsortiment för behandling av vätskande, koloniserade, kritiskt koloniserade och infekterade sår samt vid behandling av svampinfektioner i hudveck. Produktsortimentet består av absorptionsförband, kompresser, tamponader och rundtork.



Focus on health



Sorbact[®] kirurgiskt förband med dubbel effekt

**En effektiv och säker metod för behandling
av postoperativa och traumatiska sår**

Sorbact[®]


Sorbact - metoden

Sorbact-metoden är en effektiv och säker metod som binder och eliminerar patogena mikroorganismer. Sorbact-metoden verkar genom principen hydrofob interaktion.

Hydrofob interaktion är en naturlig process som de flesta bakterier och svampar använder sig av för att binda till ytor. Sorbact är en väl dokumenterad metod som innebär att patogena mikroorganismer elimineras utan att några kända biverkningar uppstår.

Sorbact – en effektiv metod

Redan inom 30 sekunder* har Sorbact bundit och eliminerat ett stort antal av vanligt förekommande patogener som t ex *Staphylococcus aureus* och *Pseudomonas aeruginosa*. Bakterier och svamp fortsätter att binda till Sorbact till dess förbandet tas bort från det behandlade området.

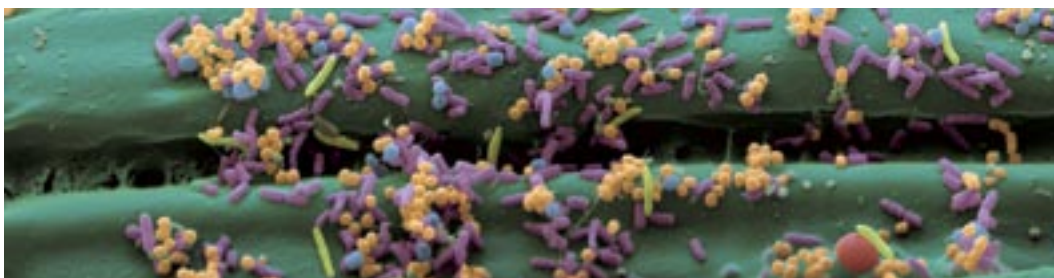

*Elektronmikroskopisk bild av vanliga sårpatogener som visar *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* och *Candida albicans* bundna till den unika Sorbact väven.*


Sorbact – en säker metod

Sorbact uppvisar inte bara effektivitet vad gäller att eliminera vanliga patogena mikroorganismer. Produktsortimentet är även enkelt och säkert att använda för såväl patienter som för sjukvårdspersonal. Med Sorbact uppnår man positiva behandlingsresultat **utan** oönskade bieffekter såsom:

1. Utveckling av resistenta mikroorganismer
2. Cytotoxicitet
3. Allergi
4. Negativa miljöeffekter

*Referens: Journal of Wound Care, volym 15, nummer 04, april 2006

Sorbact kirurgiskt förband med dubbel effekt

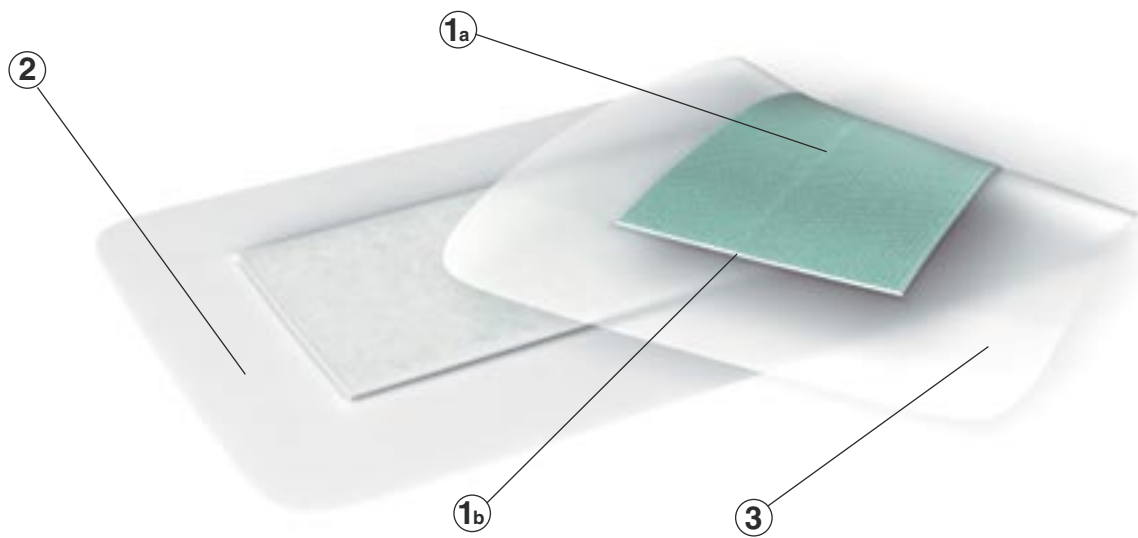

Egenskaper och fördelar

- | | |
|---|--|
| 1a. Adsorption av mikroorganismer genom den väldokumenterade Sorbact-metoden. | Binder och eliminerar sårpatogener utan att resistensutveckling uppstår, vilket ger en säker bakteriekontrollerande effekt. |
| 1b. Absorberande non-woven dyna. | Absorberar exsudat. |
| 2. Transparent semipermeabel film. | Möjlighet att inspektera omgivande hud. Skyddar såret från kontaminering. Tillåter vattenånga och syre att penetrera filmen.
Vattenavvisande, duschbar. |
| 3. Hypoallergen häftmassa. | Låg risk för hudirritation. |